


Manual de Regras de Boa Utilização da Sala de Culturas Celulares DEQB

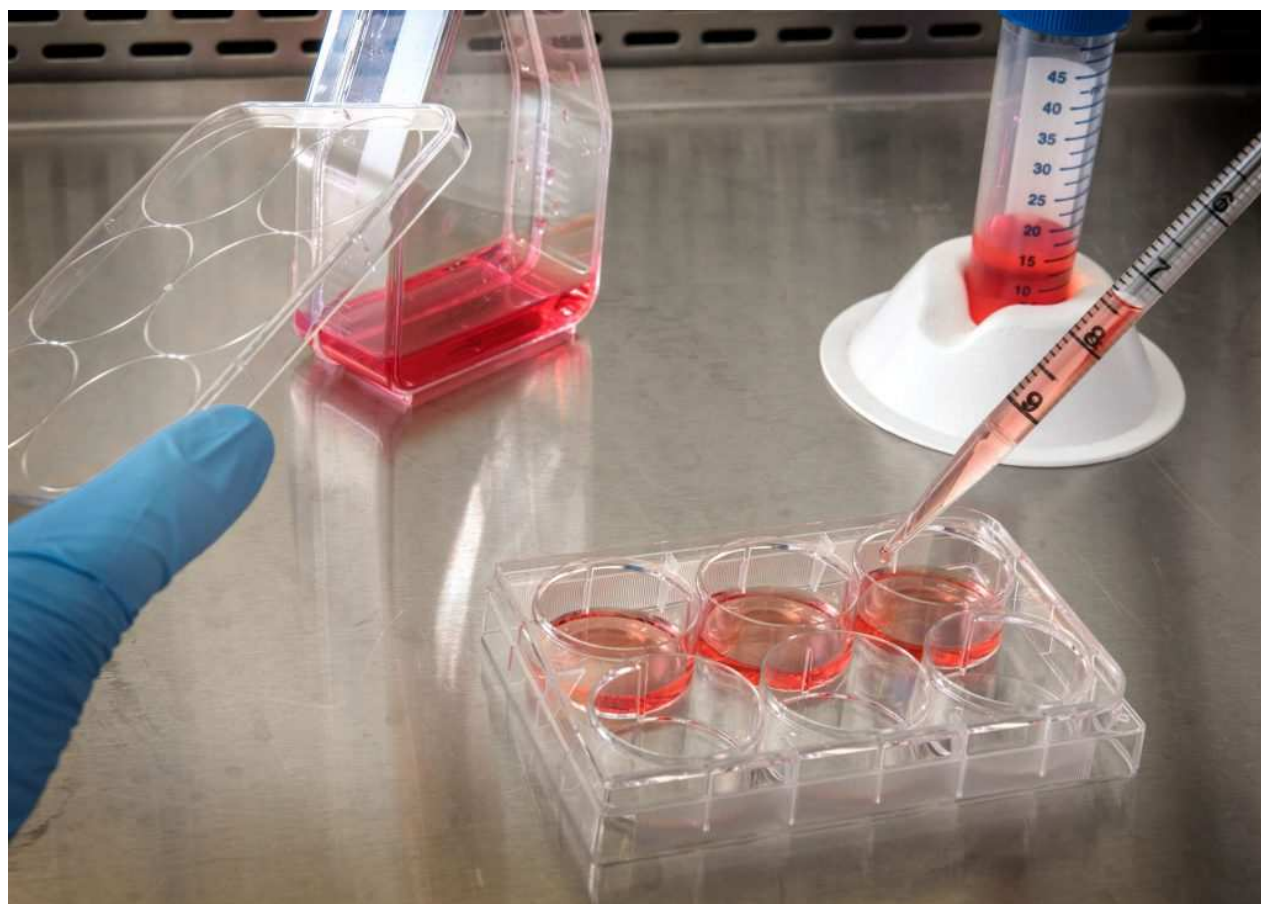

Localização: E-102

Responsável: Professor Nuno Azevedo

Técnicos responsáveis: Carla Ferreira, Joana Rocha e Sílvia Faia

Introdução

A sala de culturas celulares é um espaço controlado e dedicado ao trabalho com células vivas. Este documento tem como objetivo fornecer instruções claras e detalhadas para a correta utilização da sala de culturas celulares, garantindo a integridade das amostras, a segurança dos utilizadores e a conformidade com as normas de biossegurança. Serão abordados procedimentos operacionais, boas práticas laboratoriais e protocolos de limpeza e desinfecção.

É fundamental que todos os utilizadores leiam atentamente este documento antes de iniciarem qualquer atividade na sala de cultura celular, assegurando assim um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

A sala localizada no piso -1 do Departamento de Engenharia Química e Biológica (DEQB) está organizada de forma a otimizar a funcionalidade e a segurança dos utilizadores (figura 1).

Equipamentos da sala de culturas celulares:

- **Câmara de fluxo laminar Classe II:** Protege as culturas de contaminação e o operador de aerossóis biológicos.
- **Microscópio Invertido:** Para monitorização das culturas em tempo real. Objetivas 10x, 20X, 40x, 60x
- **Centrífuga:** Para separação celular localizada numa bancada separada.
- **Banho-maria:** Para descongelação/aquecimento de meios e reagentes.
- **Incubadora de CO₂:** Mantém as células em condições controladas (temperatura, humidade e CO₂).

E-102

Sala de Culturas Celulares

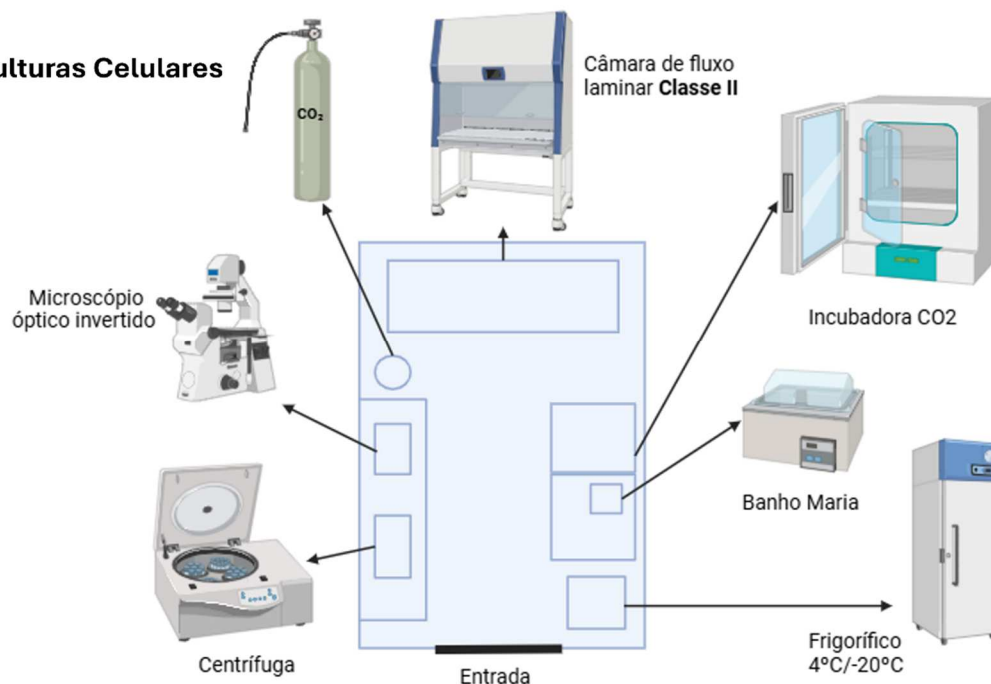


Figura 1. Representação esquemática do *layout* da sala de culturas celulares.

Regras Gerais

1. Marcação prévia:

- Aceder ao link

<https://deq.fe.up.pt/infodeq/cell/>

- No descritivo da reserva referenciar o tipo de trabalho a realizar na sala (mudança de meio, ensaio, etc.)

2. Acesso Autorizado:

- Apenas pessoas autorizadas podem aceder à sala. Esta autorização depende da solicitação prévia e preenchimento do documento em anexo (anexo I).
- É obrigatório registar a entrada e saída no livro de registos da sala.
- É obrigatório lavar sempre as mãos com sabão **ANTES** de entrar.
- Ao entrar utilizar ou trocar para bata própria de uso dentro da sala.
- Colocar luvas disponíveis na sala.

3. Manutenção da Sala:

- Mantenha a sala **SEMPRE** organizada e limpa.
 - Todos os resíduos devem ser colocados nos recipientes apropriados.
 - Utilizar corretamente todos os equipamentos dentro da sala de culturas, em caso de dúvidas solicitar ajuda das responsáveis pela sala.
 - Informar imediatamente qualquer problema nos equipamentos aos técnicos responsáveis pela sala.
-

Procedimentos de Trabalho

Certifique-se de que os materiais e reagentes necessários estão disponíveis antes de iniciar o seu trabalho. Utilize apenas materiais estéreis e manipule-os em condições assépticas.

1. Uso da câmara de Fluxo Laminar:

- Ligue a câmara de fluxo assim que entrar na sala e ligue os UV's durante 10 minutos (recomendável).
- Após exposição da câmara aos UV's, ligar fluxo e deixar estabilizar seguindo instruções do equipamento.
- Desinfete **SEMPRE** as luvas com etanol 70% (vol/vol) antes de iniciar o trabalho na câmara.
- Limpe toda a superfície interna com etanol 70% (vol/vol) antes do uso e no final da utilização.
- Evite movimentos bruscos dentro da câmara de fluxo para não destabilizar o fluxo de ar comprometendo a esterilidade.
- No final da utilização e se não existirem mais reservas deverá ligar os UV's 20 minutos e findo o tempo desligar a respetiva câmara.

2. Culturas Celulares:

- Trabalhe apenas com uma cultura de cada vez para evitar contaminação cruzada.
- Inspecione as culturas regularmente para identificar sinais de contaminação.
- Alerta os técnicos responsáveis para qualquer situação anormal.

3. Limpeza

- Limpe todas as superfícies utilizadas com etanol 70% (vol/vol).
- Certifique-se de que nenhum material ou reagente foi deixado fora do lugar e encontra-se devidamente identificado.
- TODO o material não identificado será descartado.

Este manual deve ser seguido rigorosamente para garantir a integridade dos trabalhos realizados, a segurança dos utilizadores e o bom funcionamento da sala. Dúvidas ou sugestões devem ser direcionadas aos responsáveis pela sala.

O não cumprimento das regras pode resultar em:

- Advertências formais.
- Suspensão do acesso à sala.
- Responsabilização por danos materiais ou experimentais.

Anexo

Formulário de Pedido de Acesso à Sala de Culturas Celulares

Identificação

- Nome do responsável:
 - Nome do investigador/aluno:
 - Unidade/Grupo de investigação:
 - Contacto (email/telefone):
 - Já trabalhou noutras salas de cultura celular?
 - ☐ Sim – Onde:
 - ☐ Não
-

Informação sobre a Atividade

- Linha(s) celular(es) a utilizar:
- As células estão certificadas livres de micoplasma?
 - ☐ Sim
 - ☐ Não
 - ☐ Teste pendente
- Tipo de atividade pretendida:
 - ☐ Manutenção de culturas
 - ☐ Experiências com células vivas
 - ☐ Criopreservação
 - ☐ Outras (especificar):
- Frequência de utilização estimada:
 - ☐ Diária
 - ☐ Semanal
 - ☐ Esporádica
- Período previsto de utilização:
 - ☐ Data de início:
 - ☐ Data de fim:

(caso seja trabalho contínuo não colocar data de fim)
- Autorizado a trabalhar sozinho?
 - ☐ Sim
 - ☐ Não (requer supervisão)

Declarações

- ☐ Comprometo-me a seguir todos os procedimentos operacionais da sala.
- ☐ Concordo em manter a sala limpa, organizada e livre de contaminações.
- ☐ Comprometo-me a registrar todas as atividades de forma clara e documentada.

Assinatura do investigador/aluno: _____

Data: ____ / ____ / ____

Validação pelo responsável da sala:

☐ Aprovado ☐ Rejeitado

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____